

補聴器プログラミングガイド

プログラミング接続

対応プログラマー：

- NOAHLink ワイヤレス 2 / NOAHLink ワイヤレス
- HiPro 2 / HiPro USB / SpeedPort 2 / SpeedPort / NOAHLink

製品



RIC RT



mRIC R



RIC 312



ITE R



製品



ITC/HS R



CIC



CIC R NW



CIC NW




IIC NW



ケーブルの接続



CIC NW

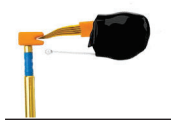

IIC NW

Notes

- ・フレキシブルコネクターを使用してプログラミングする際は、補聴器に電池を入れて行うことをお勧めします。
- ・プログラミング中は補聴器の音量調整が無効になるので、VC (ボリュームコントロール) の位置は関係ありません。
- ・紫色のプログラミングケーブルをご使用ください。フレキシブルコネクターをプログラミングケーブルに接続します。

操作説明動画

